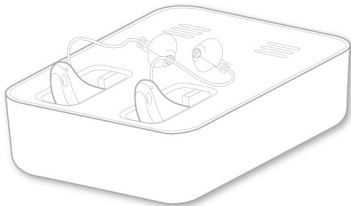


signia

Inductive Charger E

Brugsanvisning



Indhold

Før du starter	4
Komponenter	6
Klargøring af opladeren	7
Opladning	9
Korrekt position for høreapparaterne	11
Opladningsstatus	12
Tips til opladning	15
Yderligere oplysninger	23
Vedligeholdelse	23
Fejlfinding	24

Vigtige sikkerhedsoplysninger	27
Personsikkerhed	27
Produktsikkerhed	30
Vigtige oplysninger	32
Symbolforklaring	32
Drifts-, transport- og opbevaringsbetingelser	34
Tekniske data for strømforsyningen	36
Information vedrørende bortskaffelse	37
Oplysninger om CE-mærkning	37
Landespecifikke oplysninger	39

Før du starter

Denne enhed er beregnet til at oplade vores specifikke høreapparater med indbyggede ladeceller (genopladelige litium-ion-batterier). Din høreapparatspecialist vil oplyse dig om kompatible modeller.

Opladeren er kun beregnet til indendørs brug.
Følg betjeningsvejledningen i afsnittet "Drifts-, transport- og opbevaringsbetingelser".

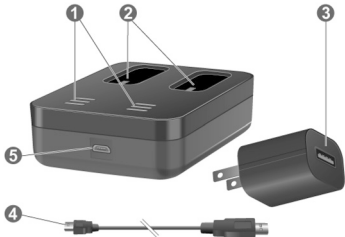
Opladeren er ikke beregnet til at transportere høreapparaterne rundt.



FORSIGTIG

Læs denne brugsanvisning grundigt igennem og følg sikkerhedsoplysningerne i dette dokument for at undgå skader.

Komponenter



① Status-LED'er

② Opladningspladser

③ Strømsik

④ USB-strømkabel

⑤ USB-port til strømforsyning

Klargøring af opladeren



BEMÆRK

Brug af inkompatible dele udgør en fare for fejlfunktion.

- ▶ Brug kun den strømforsyning og den landespecifikke adapter der blev leveret med opladeren.

Tilslutning af USB-strømkablet

- ▶ Tilslut mikro-USB-siden af USB-strømkablet til opladeren ①.
- ▶ Tilslut den anden side af USB-strømkablet til strømstikket ②.



Opladning



ADVARSEL

Risiko for elektrisk stød!

- ▶ Tilslut kun opladeren til en USB-strømkilde på 5 V jævnstrøm, der er i overensstemmelse med IEC 60950-1 og/eller IEC62368-1.



BEMÆRK

Sørg for at strømstikket er let tilgængeligt, så det let kan fjernes fra stikkontakten, hvis det er nødvendigt.

- ▶ Tilslut opladeren til strømforsyningen.
En grøn LED for hver opladningsplads angiver, at der er strøm på opladeren, og at den er klar til brug.
- ▶ Sæt høreapparaterne i opladningspladserne som vist på billedet. Du kan oplade begge høreapparater samtidigt.
- ▶ Høreapparaterne slukkes automatisk, og opladningen starter. Opladningsstatussen vises, se tabellen "Opladningsstatus" på de næste sider.



- ▶ Tag høreapparaterne ud af opladeren, når du vil anvende dem. De tændes automatisk.
- ▶ Du kan lade opladeren være sat i eller fjerne den fra strømforsyningen.

Korrekt position for høreapparaterne

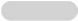
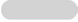
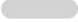


- Både højre og venstre høreapparat kan sættes i begge opladningspladser. Pladserne er ikke sidespecifikke.

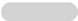
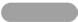

- Høreapparaterne ligger løst i opladningspladserne.
- Øreindsatserne til høreapparaterne skal altid vende mod status-LED'erne.
- Kontrollér, at den nederste del af høreapparaterne sidder godt i opladningspladserne.




Opladningsstatus




LED	Statusbeskrivelse
------------	--------------------------

	Ingen LED:
	Opladeren er ikke forbundet med
	strømforsyningen.

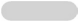

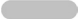
LED **Statusbeskrivelse**



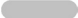
-  Enkelt grøn LED:
 -  Opladeren er tilsluttet en strømforsyning
 -  og parat til at oplade. Der er ikke sat noget høreapparat i den pågældende opladningsplads, eller høreapparatet er ikke sat korrekt i.
-


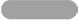

-  Grøn blinkende LED:
 -  Opladningsstatussen for høreapparatet udlæses,
 -  før opladningen starter.
-

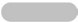


-  Én LED lyser orange:
 -  Opladningsstatus 0 til 33 %
 - 
-

LED Statusbeskrivelse




 To orange LED'er:
 Opladningsstatus 34 til 66 %


 Tre orange LED'er:
 Opladningsstatus 67 til 99 %


 Tre LED'er lyser grønt:
 Høreapparatet er fuldt opladet.


 Tre orange blinkende LED'er: Afkølingsfase
 Opladningen genoptages efter 5 minutter.


LED Statusbeskrivelse

-  Blinkende/konstant røde LED'er: Fejl
 -  Læs mere i afsnittet "Fejlfinding".
 - 
-

Tips til opladning

Måske har du spørgsmål til, hvordan du oplader dine høreapparater på den bedste måde. Læs spørgsmålene og svarene nedenfor. Din høreapparatspecialist kan hjælpe dig, hvis du har yderligere spørgsmål.



Hvor tit skal jeg oplade høreapparaterne?

Vi anbefaler, at du oplader dine høreapparater dagligt, også selv om ladecellen ikke er løbet helt tør for strøm. Oplad dem natten over, så du kan starte dagen med fuldt opladede høreapparater.



Hvor lang tid tager opladningen?

En fuld opladningscyklus varer ca. 4-5 timer.

Efter 30 minutter kan du bruge dine høreapparater i op til 7 timer.

Opladningstiden kan variere afhængigt af brugen af høreapparaterne og ladecellens alder.



Kan jeg lade høreapparaterne sidde i opladeren?

Selv hvis de er ladet helt op, kan du lade høreapparaterne sidde i opladeren. Opladningen stopper automatisk, når de er ladet helt op.



Hvad sker der, hvis jeg glemmer at lade dem op?

Dine høreapparater slukker automatisk, når ladecellen løber tør for strøm. Oplad høreapparaterne så hurtigt som muligt. Høreapparater, som ikke er blevet opladet i over 6 måneder, kan blive beskadiget pga. en total afladning af ladecellen. Totalt afladede ladeceller kan ikke oplades igen og skal udskiftes.



Hvad nu hvis jeg ikke vil bruge høreapparaterne i flere dage eller længere?

- Kortvarig opbevaring (op til flere dage): Sluk for dine høreapparater på trykknappen, eller sæt dem i opladeren med tilsluttet strøm.

Opladeren skal være tilsluttet strømforsyningen.

Hvis opladeren ikke er tilsluttet strømforsyningen, og du sætter høreapparaterne i opladeren, slukkes høreapparaterne **ikke**.

Vær opmærksom på, at når du slukker høreapparaterne med en fjernbetjening eller smartphone-app, slukkes høreapparaterne **ikke** helt. De er på standby og forbruger stadig en smule strøm.

Din oplader tørrer høreapparaterne, mens de oplades. Du kan også bruge almindelige produkter til at tørre dine høreapparater.

- Langvarig opbevaring (uger, måneder...): Lad først dine høreapparater fuldt op. Sluk for dem på trykknappen, før de lægges til side. Vi anbefaler, at du anvender tørreprodukter under opbevaringen af høreapparaterne. Oplad dine høreapparater hver sjette måned for at undgå total afladning af ladecellen. Totalt afladede ladeceller kan ikke oplades igen og skal udskiftes. Vi anbefaler dog at genoplade hyppigere end hver sjette måned. Overhold opbevaringsbetingelserne i brugsanvisningen til høreapparaterne.

Spørg din høreapparatspecialist om anbefalede tørreprodukter.


 **Hvad skal jeg være opmærksom på under opladningen?**

Høreapparaterne og opladeren skal være rene og tørre. Følg betjeningsvejledningen i afsnittet "Drifts-, transport- og opbevaringsbetingelser".

Undgå opladning ved høje omgivelsestemperaturer, da det kan forkorte ladecellens levetid og kapacitet.

Hvis du bruger opladeren i meget varme omgivelser, skal du være opmærksom på, at den holder op med at oplade, hvis opladerens temperatur overskrider 42 °C, så den kan køle af. LED'erne blinker orange under

afkølingsfasen. Opladningen genoptages automatisk efter 5 minutter. Rør ikke høreapparaterne, mens LED'erne blinker orange, da de kan være varme.

 **Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg anvender en stikdåse med energisparefunktion?**

- Tænd for stikdåsen, **før** du sætter høreapparaterne i opladeren. Ellers registreres høreapparaterne muligvis ikke af opladeren.
- Sluk ikke for stikdåsen, **mens** høreapparaterne stadig er i opladeren. Ellers tændes høreapparaterne automatisk og aflades i opladeren.

Før du slukker for stikdåsen, skal du fjerne høreapparaterne fra opladeren og slukke for dem ved at trykke på trykknappen.

Yderligere oplysninger

Vedligeholdelse



BEMÆRK

Risiko for kvæstelser, forårsaget af elektrisk stød!

- ▶ Hvis rengøring er nødvendig, skal opladeren afbrydes fra strømforsyningen.
- ▶ Rengør opladeren med en blød og tør klud.
- ▶ Du må aldrig bruge rindende vand eller komme apparaterne i vand.
- ▶ Opladeren må ikke steriliseres eller desinficeres.

Fejlfinding

Problem og mulige løsninger

Ingen LED'er lyser.

- Kontrollér, om strømforsyningen er forbundet korrekt.
-

LED'erne blinker orange.

Opladeren har nået temperaturgrænsen og er nu i afkølingsfasen. Opladningen genoptages efter 5 minutter.

- Rør ikke høreapparaterne, mens LED'erne blinker orange, Høreapparaterne kan være varme.
-

Problem og mulige løsninger

LED'erne blinker rødt.

Der er opstået en fejl i opladeren.

- Tag høreapparaterne ud af opladeren, og frakobl opladeren fra strømforsyningen.
- Tilslut opladeren til strømforsyningen igen, og sæt høreapparaterne tilbage i opladningspladserne.

Hvis LED'erne stadig blinker rødt:

- Tag høreapparaterne ud af opladeren, og frakobl opladeren fra strømforsyningen.
 - Kontakt din høreapparatspecialist for at få hjælp.
-

Problem og mulige løsninger

LED'erne lyser konstant rødt.

Der er opstået en fejl i høreapparaterne.

- Tag høreapparaterne ud af opladeren, og frakobl opladeren fra strømforsyningen.
 - Kontakt din høreapparatspecialist for at få hjælp.
-

Kontakt din høreapparatspecialist, hvis du oplever yderligere problemer.

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Personsikkerhed



ADVARSEL

Risiko for forbrændinger!

- ▶ Sæt ikke andet end dine høreapparater i opladeren.



ADVARSEL

Risiko for elektrisk stød!

- ▶ Enheder, der er åbenlyst beskadigede, må ikke bruges, men skal returneres til høreklubben.



ADVARSEL

Fare for kvælning!

Apparatet indeholder små dele, som kan sluges.

- ▶ Opbevar høreapparater, batterier og tilbehør utilgængeligt for børn og mentalt handicappede.
- ▶ Hvis små dele sluges, skal læge eller hospital straks kontaktes.



ADVARSEL

Bemærk at enhver uautoriseret ændring i produktet kan medføre beskadigelse af produktet eller personskader.

- ▶ Brug kun godkendte dele og tilbehør.
Spørg evt. din høreapparatspecialist om hjælp.



ADVARSEL

Risiko for eksplosion!

- ▶ Brug ikke apparatet i omgivelser med eksplosionsfare (f. eks. i mineområder).

Produktsikkerhed



BEMÆRK

- ▶ Beskyt apparaterne imod stærk varme. Udsæt dem ikke for direkte sollys.



BEMÆRK

- ▶ Beskyt apparaterne imod høj luftfugtighed.



BEMÆRK

- ▶ Tør ikke apparaterne i mikrobølgeovnen.



BEMÆRK

- ▶ Må ikke anvendes, når statusindikatorerne er røde.



BEMÆRK

Mens strømmen er slået til, kan opladerens magnetfelt forstyrre elektronisk udstyr og slette gemte data.

- ▶ Mens strømmen er slået til, skal opladeren holdes væk fra kreditkort, computere, monitorer, tv-apparater, hukommelsesmedier og andet elektronisk udstyr.



BEMÆRK

- ▶ Tab ikke produktet. De indvendige komponenter kan blive beskadiget.



BEMÆRK

- ▶ Enheden må ikke adskilles.

Vigtige oplysninger

Symbolforklaring

Symboler anvendt i dette dokument



Angiver en situation, der kan føre til alvorlige, moderate eller mindre personskader.



Angiver mulig beskadigelse af ting.



Råd og tips til bedre håndtering af din enhed.

Symboler på apparatet eller emballagen



Mærkat om CE-mærkning, bekræfter overholdelse af visse EU-direktiver, se afsnittet "Oplysninger om CE-mærkning".



Angiver den juridiske producent af apparatet.



Bortskaf ikke apparatet som almindeligt affald. Læs mere i afsnittet "Information vedrørende bortskaffelse".



Læs og følg instruktionerne i brugsanvisningen.



Angivelse af, at udstyret er medicinsk udstyr.

Drifts-, transport- og opbevaringsbetingelser

Driftsbetingelser

Temperatur	10 til 30 °C
Relativ luftfugtighed	20 til 75 %
Atmosfærisk tryk	700 til 1.060 hPa

Vær opmærksom på følgende forhold i forbindelse med længerevarende transport eller opbevaring:

	Opbevaring	Transport
Temperatur	10 til 40 °C	-20 til 60 °C
Relativ luftfugtighed	10 til 80 %	5 til 90 %
Atmosfærisk tryk	700 til 1.060 hPa	700 til 1.060 hPa

For andre dele, som f.eks. høreapparater, kan der gælde andre betingelser.

Tekniske data for strømforsyningen

Indgangsspænding:	100-240 V AC
Indgangsstrøm:	0,15-0,3 A
Indgangsfrekvens:	50-60 Hz
Udgangsspænding:	5 V DC
Udgangsstrøm:	1 A

Information vedrørende bortskaffelse

Genbrug enheder, tilbehør og emballage i henhold til lokale forskrifter.

Oplysninger om CE-mærkning

CE-mærket angiver overensstemmelse med de europæiske direktiver:

- 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet
- 2014/35/EU om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser
- 2011/65/EU RoHS om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer



CE-mærket angiver overensstemmelse med visse europæiske direktiver. Den fulde ordlyd af overensstemmelseserklæringen kan findes på www.signia-hearing.com/doc.

Denne enhed opfylder EN 55011:2016/A1:2017 gruppe 2, klasse B.

Denne enhed opfylder del 18 i FCC-reglerne og Canadas CAN RSS-216/CNR-216.

Den må bruges på følgende betingelser:

- Enheden må ikke forårsage skadelig interferens.
- Den må ikke påvirkes af interferens fra andre produkter, herunder påvirkning, der medfører uønsket ændring af apparatets funktion.
- Brugeren skal holde en minimumafstand på 20 cm (8 tommer) under opladningsprocessen.

Landespecifikke oplysninger



Juridisk producent

WSAUD A/S

Nymoellevej 6

3540 Lyngø

Danmark

Document No. 04294-99T01-6200 DA

Order/Item No. 109 957 99

Master Rev02, 08.2020

© 09.2020, WSAUD A/S. All rights reserved



www.signia-hearing.com