


## Produktinformation

# Charger Plus MNB T R

Charger Plus til Alpha miniBTE T R er nem at bruge i hjemmet og på farten. Opladerens låg tjener som beskyttelse og opbevaring af høreapparaterne. Det genopladelige indbyggede litium-ion-batteri gør det muligt at bruge Charger Plus som en powerbank, når den ikke er tilsluttet en strømkilde.

Opladeren bruger induktiv teknologi, der muliggør kontaktløs opladning af høreapparaterne via induktion. Den magnetiske forbindelse i opladeren sikrer, at høreapparaterne forbliver i opladeren. Når høreapparaterne sættes i opladeren, begynder opladningen automatisk. Høreapparaterne tændes, når de tages ud af opladeren.

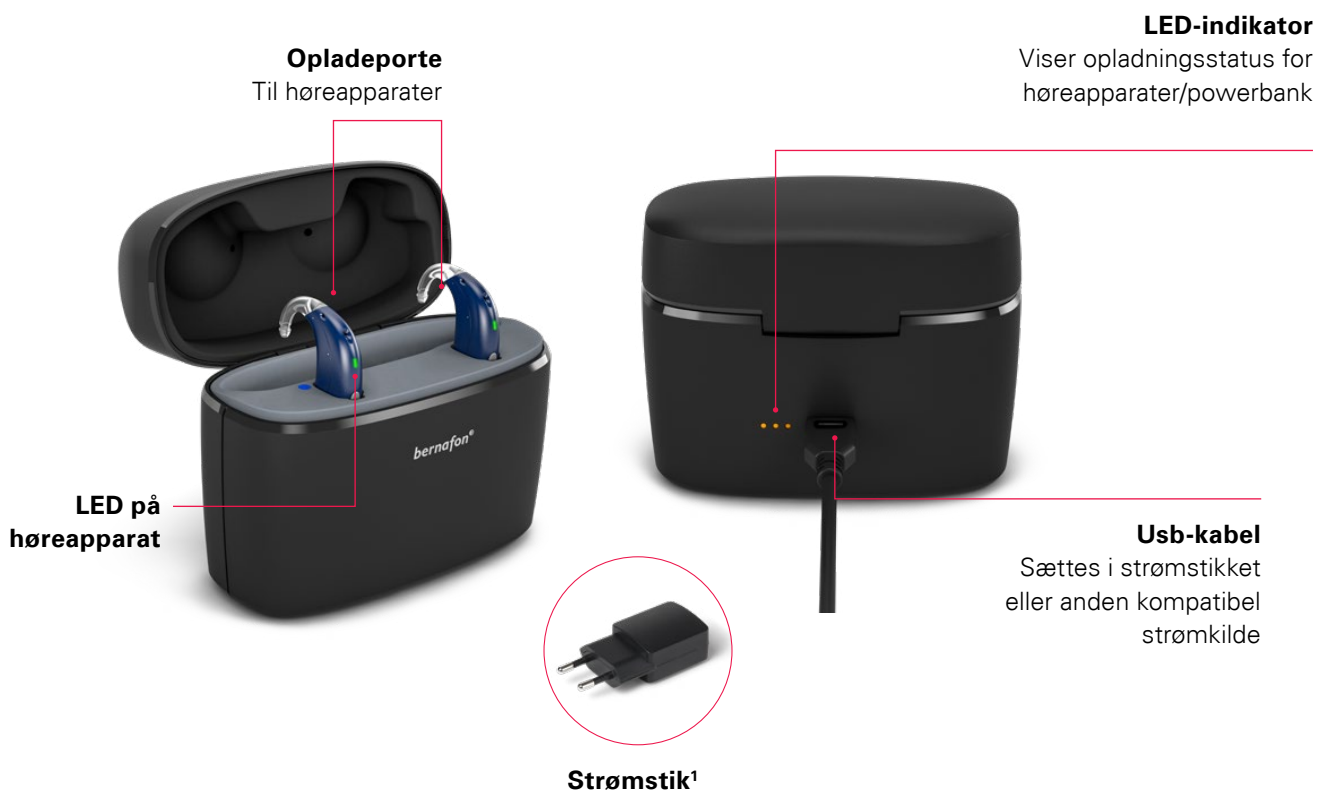

## Pakkens indhold

- Brugervejledning
- Strømstik
- Usb-kabel

## Opladningstid for høreapparaterne (når de er løbet helt tør for strøm)

- 3,5 timer = fuldt opladet
- 1 timer = 40 % opladet
- 30 min = 20 % opladet

<sup>1</sup> Strømstikket kan variere fra land til land

# Charger Plus MNB T R – Tekniske data

## Charger Plus MNB T R

Udviklet til/kompatibel med	Alpha, miniBTE T R
Dimensioner	Højde 76,4 mm / Bredde 47,2 mm / Længde 95 mm
Vægt	180 gram
Farve	Sort
Strømskik	USB A
Statusindikatorer	LED på opladeren ved tilslutning til strømstik: Angiver opladningsstatus for powerbank LED på opladeren ved frakobling fra strømstik: Angiver batteriniveau for powerbank LED på høreapparaterne ved opladning: Angiver opladning
Opladningstid for høreapparater	Maks. 3,5 timer afhængigt af batteriets niveau inden opladning (temperatur: +10 °C til +35 °C) Maks. 5 timer afhængigt af batteriets niveau inden opladning (temperatur: +5 °C til +10 °C / +35 °C til +38 °C)
Opladningstid for powerbank	Maks. 4 timers opladning afhængigt af batteriets niveau inden opladning Temperatur: +10 °C til +35 °C
Strømkilde	Medfølgende strømforsyning
Indgangsspænding	5 V DC
Indgangsstrøm	Maks. 1A (opladning af internt batteri og to høreapparater)
Ledning	Aftagelig ledning/150 cm
Tilsluttet eksternt udstyr	Når det er tilsluttet eksternt udstyr, der er tilsluttet en stikkontakt, skal dette udstyr overholde IEC-62368 eller tilsvarende sikkerhedsstandarder.

## Brugsbetingelser

Driftsforhold	Temperatur: +5 °C til +38 °C Relativ luftfugtighed: 5 % til 93 %, ikke-kondenserende
Transport- og opbevaringsforhold	Temperatur: -25 °C til +60 °C Relativ luftfugtighed: 5 % til 93 %, ikke-kondenserende
Atmosfærisk tryk	700 hPa til 1060 hPa

## Tekniske data: Strømstik

Indgangsspænding	100 – 240 V AC
Indgangsfrekvens	50 – 60 Hz
Udgangsspænding	5 V DC
Udgangsstrøm	1 A



### Fabrikant

#### SBO Hearing A/S

Kongebakken 9  
DK-2765 Smørum  
Danmark

### Globalt hovedkontor

#### Bernafon AG

Morgenstrasse 131  
3018 Bern  
Schweiz  
Tlf.: +41 31 998 15 15  
info@bernafon.com  
www.bernafon.com